


ODONTOSCOPE®

FR

L'Odontoscope est un dispositif médical qui facilite l'examen de la cavité buccale.

L'Odontoscope associe un grand miroir avec un écarteur de lèvres et de joues, optimisant ainsi l'observation complète des arcades dentaires. Le bord du miroir est le "manche du miroir". Le bord de l'écarteur est le "manche de l'écarteur".

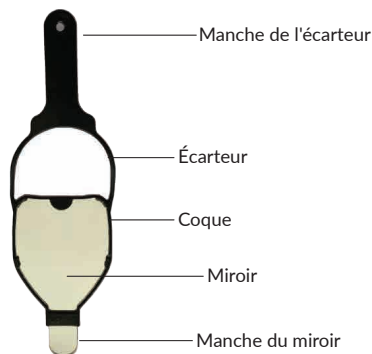

Indication d'utilisation

Examen de la cavité buccale d'une personne.

Utilisateur prévu

Créé à l'origine pour les professionnels de la santé bucco-dentaire tels que les dentistes, les spécialistes de la médecine bucco-dentaire et les hygiénistes dentaires, l'Odontoscope peut être utilisé par tout utilisateur (âgé de plus de 18 ans) en suivant les instructions d'utilisation détaillées dans cette notice ainsi que présentées dans une vidéo en ligne, en scannant le code QR.

Description

L'Odontoscope est un dispositif médical qui facilite l'examen de la cavité buccale. L'Odontoscope combine un grand miroir avec un écarteur de lèvres et de joues, optimisant ainsi l'observation complète des arcades dentaires. L'Odontoscope est constitué d'un élastomère thermoplastique, qui offre une élasticité douce pour une fonctionnalité sécurisée lorsqu'il est placé dans la bouche. L'Odontoscope s'adapte donc à l'ouverture de la bouche de la personne. L'utilisateur doit tenir les deux manches (miroir et écarteur) de l'Odontoscope pour maintenir la bouche à l'ouverture optimale pour l'examen intraoral. L'Odontoscope est actuellement fourni en une seule taille.

Indications

L'Odontoscope est avant tout un outil d'examen intraoral, des arcades dentaires, des dents et des gencives, mais aussi des structures anatomiques telles que le palais. Cet examen visuel peut être capturé par une caméra incluant un smartphone afin de le documenter, de le partager dans une application ou de le transmettre à un professionnel de la santé dentaire à des fins de diagnostic.

Composition

La coque de l'Odontoscope est constituée d'élastomère thermoplastique. Le miroir est en polystyrène, mais n'entre pas en contact avec les muqueuses de la personne. L'utilisation de l'Odontoscope est contre-indiquée en cas d'allergie à l'un de ces composants.

Avertissement

L'Odontoscope est destiné à un usage individuel uniquement. L'Odontoscope n'est pas stérile. Après utilisation, l'Odontoscope doit être rincé à l'eau claire comme une brosse à dents. Ne pas utiliser si la taille de l'Odontoscope est trop grande par rapport à l'ouverture de la bouche (ne pas forcer l'entrée). Ne pas utiliser l'Odontoscope si le miroir est rayé ou cassé. L'Odontoscope ne peut pas être utilisé si l'un de ses composants est manquant. Ne pas utiliser l'Odontoscope sur des enfants de moins de 6 ans. L'utilisation de l'Odontoscope est contre-indiquée en cas d'allergie à l'un de ces composants. N'utiliser l'Odontoscope qu'à bon escient et conformément aux instructions d'utilisation détaillées dans cette notice. Stockage: entre 2°C et 28°C et éviter la lumière directe du soleil.

Application

Une fois sorti de son emballage, l'Odontoscope est à plat dans sa position de "repos".

1. Tenez le manche du miroir, assurez-vous que le miroir est orienté vers vous (figure 1).
 2. Saisissez le manche de l'écarteur et pliez l'écarteur vers vous jusqu'à ce que les deux poignées de l'écarteur et du miroir se rejoignent et s'alignent (figure 2).
 3. Maintenez les deux manches dans cette "position fermée" (figure 3).
 4. Pour l'arcade supérieure, positionnez l'Odontoscope de manière à ce que le miroir soit orienté vers vous. Insérez l'Odontoscope en commençant par un des coins de la bouche (figure 4).
 5. Veillez à ce que l'Odontoscope soit bien positionné en bouche : de manière à ce que l'écarteur soit placé entre les dents et la lèvre supérieure (figure 5).
 6. Ouvrez doucement l'angle de l'Odontoscope jusqu'à la vision optimale (figure 6).
 7. Pour l'arcade inférieure, positionnez l'Odontoscope de manière à ce que le miroir soit orienté vers le bas. Insérez l'Odontoscope en commençant par un coin de la bouche (figure 7).
 8. Veillez à ce que l'Odontoscope soit bien positionné en bouche : de manière à ce que l'écarteur soit placé entre les dents et la lèvre inférieure (figure 8).
 9. Ouvrez doucement l'angle de l'Odontoscope jusqu'à la vision optimale (figure 9).
- Pour retirer l'Odontoscope, refermez doucement l'angle de l'Odontoscope jusqu'au contact des manches du miroir et de l'écarteur. Retirez l'Odontoscope par le coin gauche ou droit de la bouche (commisures).

Le fabricant est responsable de la qualité et de la fonctionnalité du dispositif uniquement lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

Mode d'emploi :



Arcade supérieure :



Arcade inférieure :



Manufacturer : Fsbid Simon
Benoliel, 322 rue Haute. 1000
Brussels. Belgium

