


# ODONTOSCOPE®

NL

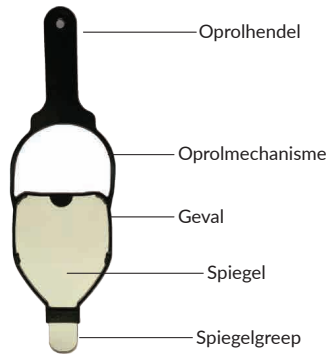

De Odontoscoop is een medisch hulpmiddel dat het onderzoek van de mondholte vergemakkelijkt. De Odontoscoop combineert een grote spiegel met een lip- en wangretractor, waardoor de volledige observatie van de tandbogen wordt geoptimaliseerd. De rand van de spiegel is de "spiegelgreep". De rand van de retractor is de "Oprolhendel".

## **Indicatie voor gebruik**

Het onderzoek van de mondholte van een persoon.

## **Beoogde gebruiker**

De Odontoscoop is oorspronkelijk gemaakt voor professionals in de mondhygiëne, zoals tandartsen, specialisten op het gebied van mondzorg en mondhygiënist, maar kan door elke gebruiker (ouder dan 18 jaar) worden gebruikt volgens de stappen in deze gebruiksaanwijzing en in een online video, door de QR-code te scannen.

## **Beschrijving**

De Odontoscoop is een medisch hulpmiddel dat het onderzoek van de mondholte vergemakkelijkt. De Odontoscoop combineert een grote spiegel met een lip- en wangretractor, waardoor de volledige observatie van de tandbogen wordt geoptimaliseerd. De Odontoscoop is gemaakt van een thermoplastisch elastomeer dat zachte elasticiteit biedt voor een veilige functionaliteit wanneer het in de mond wordt geplaatst. Dankzij de flexibele eigenschappen past de Odontoscoop zich aan de breedte van de mondopening aan. De gebruiker moet beide handgrepen (spiegel en retractor) van de Odontoscoop vasthouden om de mond op de optimale opening te houden voor intraoraal onderzoek. De Odontoscoop wordt momenteel geleverd in één maat.

## **Indicaties**

De Odontoscoop is primair een instrument voor intra-oraal onderzoek, van tandbogen, tanden en tandvlees; maar ook van anatomische structuren zoals het gehemelte. Dit visuele onderzoek kan worden vastgelegd met een camera of smartphone om het te documenteren, te delen in een app of door te sturen naar een tandarts of mondhygiënist voor diagnostische doeleinden.

## **Samenstelling**

De Odontoscoop bestaat uit een thermoplastisch elastomeer behuizing. De spiegel is gemaakt van HIPS High Impact Polystyrene maar heeft geen contact met de slijmvliezen van de persoon. Het gebruik van de Odontoscoop is gecontra-indiceerd in geval van allergie voor een van de onderdelen. **Waarschuwingen**

De Odontoscoop is uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik. Hij is niet steriel. Na elk gebruik moet de Odontoscoop worden afgespoeld met helder water, net als een tandenborstel. Niet gebruiken als de Odontoscoop te groot is voor de mondopening (niet forceren). Gebruik de Odontoscoop niet als de spiegel bekrast of gebroken is. De Odontoscoop kan niet worden gebruikt als een van de onderdelen ontbreekt. Gebruik de Odontoscoop niet bij kinderen jonger dan 6 jaar. Alleen gebruiken zoals bedoeld en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Bewaren: tussen 2°C-28°C en vermijd direct zonlicht.

## **Toepassing**

Eenmaal uit de verpakking ligt de Odontoscoop plat in zijn "rustpositie".

1. Houd het handvat van de spiegel vast, zorg ervoor dat de spiegel naar je toe is gericht (figuur 1).
2. Pak de handgreep van de retractor vast en vouw de retractor naar je toe totdat de twee handgrepen elkaar raken en op één lijn liggen (figuur 2).
3. Houd beide handvatten in de "gevouwen positie" (figuur 3).
4. Zorg ervoor dat de spiegel naar je toe gericht is om het plaatsen in de bovenste arche te vergemakkelijken. Breng de Odontoscoop in, beginnend bij één mondhoek (figuur 4).
5. Zorg ervoor dat de Odontoscoop optimaal gepositioneerd is, zodat de retractor tussen de tanden en de bovenlip wordt geplaatst (figuur 5).
6. Open voorzichtig de hoek van de Odontoscoop voor optimaal zicht (figuur 6).
7. Om de plaatsing in de onderste arche te vergemakkelijken, moet de spiegel naar beneden gericht zijn. Breng de Odontoscoop in, beginnend bij een mondhoek (figuur 7).
8. Zorg ervoor dat de Odontoscoop optimaal gepositioneerd is, zodat de retractor tussen de tanden en de onderlip wordt geplaatst (figuur 8).
9. Open voorzichtig de hoek van de Odontoscoop voor optimaal zicht (figuur 9). Om de Odontoscoop uit te trekken, sluit je voorzichtig de hoek van de Odontoscoop tot de handgrepen elkaar raken en haal je hem eenvoudig uit de rechter- of linkerhoek van de mond.


## **Gebruiksaanwijzing:**



## **Bovenste arche:**



## **Lagere arche:**

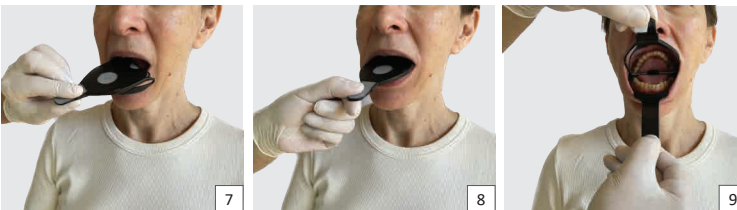

Manufacturer : Fsbid Simon  
Benoliei, 322 rue Haute. 1000  
Brussels. Belgium



De fabrikant is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en werking van de MD als deze wordt gebruikt volgens de bijgeleverde instructies.